



2010年 CTは 憧れからパートナーへ

CTを導入された先生に頂戴したアンケートより

患者さんだけでなく私のストレスも軽減されました

これまで大学に依頼してCT撮影してもらっていましたが、大学まで遠いので、患者さんに負担をかけたくなかったのが導入の一番の理由です。インプラントのほかには、埋伏過剰歯の抜歯や歯内療法に活用しています。歯内は難治性のあるものを撮影するにたいの理由がわかります。埋伏歯の術中確認にはとても役に立っています。導入してよかったと思ったのは、撮影が必要ときにすぐ対応できることが一番ですが、トラブルが起こったときに重宝しますし、術中確認にはとても役に立っています。そして、自分の治療の評価がしやすくなったのもよかった点です。すべてのインプラント症例でCT撮影ができ、確認できるようになったことは、患者さんだけでなく私のストレスも軽減されました。そして、インプラントの件数は確実に増加しましたね。CTを導入してみて、とても役に立つものだ実感しています。私の周りでも導入する友人が増えています。これから導入する歯科医院はもっと増えるのではないのでしょうか。

(千葉県印西市 亀田先生)

口腔の組織を3次元で捉えることは、歯科医療の可能性を広げます。CTは、ますます需要の高まるインプラント治療にももちろん必要不可欠ですが、矯正、外科手術、保存修復、歯周病治療においても2次元より確実な診断・治療を可能にし、結果を出すのです。

大学病院などにしかない高額な器械という認識が浸透していたCTですが、ここ数年、一般的な歯科医院にも導入されるようになってきました。次世代型のCTが次々に生み出されたからです。サージカルステントを作成するソフトが標準装備され、CAD/CAMと融合し最終補綴をイメージしてプランニングができる機種。従来の2次元のパノラマと複合で使用できる機種。そして、既存のレントゲン室に難なく設置できるようにダウンサイジングも進みました。開業のときからCTを導入する医院も増えています。これから開業される若い先生が、デンタルショーに来られて「もうCTは“デフォ”（デフォルト＝当然あるもの）」だからね…」と語られていました。

いまから始まる、この2010年。

CTは単なる憧れの存在から、信頼のおける良きパートナーとして、歯科医院になくなくてはならないものになっていくことでしょう。

さらに難症例が増えました

インプラントの難症例が多いので導入しました。特に、サイナスリフトやグラフト処置に対して導入してよかったと実感しています。CTを導入後に変化があったことは、インプラントの件数が増え、難症例がさらに増えたことです（笑）

(東京都港区 高村先生)

術前診査の情報量と質が向上しました

パノラマ複合型となり、レントゲン室に設置可能になったので導入に踏み切りました。インプラント、根治、アンブタ、歯牙移植などに活用しています。術前診査の情報量と質が格段に向上し、導入してよかったと実感しました。マイクロスコープと合わせ、根治の難症例の治療率が上がったことも明らかな変化です。

(茨城県神栖市 安藤先生)

費用は増患で解決しました

2次元と違って患者説明がしやすいので重宝しています。インプラントのほかには、上顎洞、下歯槽管、歯根破折、根尖病巣などの症例に活用しています。高額な費用は、確かに問題でした。しかし、増患の見込みがあり、実際に導入後インプラントの患者さんがさらに増えたので解決できました。

(千葉県松戸市 脇谷先生)

患者さんへの説明がしやすく、納得してもらえます

高額な器械なので金銭的な面への懸念はありましたが、インプラントの治療を“確実に”、エンドや抜歯などの診断を“確実に”行いたいという思いが強く、導入しました。下顎管に近接した埋伏歯の抜歯は、CTでなければ適切な診断ができなかったと思います。また、患者さんに、保存不能な歯をビジュアル的に見せることができ、納得してもらえるので助かっています。

(茨城県常陸太田市 K先生)

口腔の理解度が上がるので、世界が広がったと思います

インプラントと外科に活用しています。診断力を高めるために導入し、実際、診断が明確で重宝しています。また、治療に対する考えが変わりました。口腔の理解度が上がるので、世界が広がったと思います。インプラントのオペまでの下準備が早くなったのも明らかな変化です。

(千葉県八千代市 高橋先生)

チェアを撤去してスペースを作りました

インプラント治療に絶対必要なので導入しました。設置スペースは金額とともに悩ましい問題でしたが、結局チェアを1台撤去してCT室を作り、設置しました。インプラント以外には根治、抜歯などに活用の度合いが高いです。診断が確実になったので、安心してオペをすることができます。

(埼玉県秩父市 栗原先生)

2次元よりも失敗や誤診を避けられると思います

インプラント埋入の診断のために導入しました。インプラント、歯周病、根尖病巣、歯根破折の診断に活用しています。2次元よりも失敗や誤診を避けられると感じています。患者さんに見せて説明するのに説得力が強くなり、説明がしやすくなりました。医科のように保険で請求できれば撮影頻度が増え、普及率も高くなるでしょうね。


(東京都世田谷区 田村先生)

患者さんが画像を見て、よく理解できると言っています

よりよい診療を行うためにはCTの画像が必要だと思い、メーカー各社を見て回って導入しました。診療全般に活用していますが、やはり、従来の2次元の画像とは情報量が格段に違います。埋伏歯の根尖と下顎管の状態が把握できず、根吸収や、どの根管の炎症かすぐに診断できます。患者さんが画像を見て驚くと同時に、よく理解できると言っています。

(匿名希望)

sirona
The Dental Company

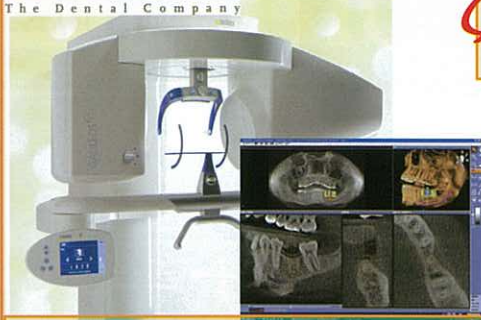

GALILEOS Comfort / Compact

標準価格
Comfort 29,000,000 円（税別）
Compact 19,800,000 円（税別）
本体のみの価格です。
オプション、取付費等は別途かかります。


ガリレオス、ここがポイント！

- ・顎顔面のほぼ全領域を一度に撮影。
- ・インプラントプランニングリフトによるサージカルガイド作製サービスあり。
- ・CAD/CAMと融合し、最終補綴物をイメージしたインプラントプランニングができる。

直径15cmという非常に大きな球体で、顎顔面のほぼ全領域を一度に撮影できることで定評のある『GALILEOS Comfort』。ソフトウェアは、画像診断を直感的に理解できる形で統合されており、ハードウェアは、洗練されたプラットフォームと線量効率のよいイメージインテンシファイアテクノロジーに基づいています。しかも、X線線量は世界各国で販売されている製品の中で、最小レベルです。さらに、『Comfort』にはインプラントプランニングのソフトウェアが標準装備されており、同時に、プランニングデータに基づいたサージカルガイド作製のサービスも始まっています。また、『CEREC meets GALILEOS』という新たな機能も追加されました。これは、CAD/CAMシステムの『CEREC』で作成された光学印象モデルを『GALILEOS』のCT画像上にインテグレーションし、最終補綴物をイメージした補綴主導型のインプラントプランニングを可能にします。単に優れた画像を追求しているだけではなく、それ以上の付加価値をユーザーの皆様へ提供するソリューションです。『Comfort』に次いで発売された『Compact』も多くの特徴を共有しており、『Comfort』へのフルアップグレードも可能です。

User's Voice

装備の充実が一番だった。使い勝手は最高に良いと思う。（東京都港区 高村先生）
手軽に撮れ、パノラマのように使用できるので選んだ。（千葉県八千代市 高橋先生）

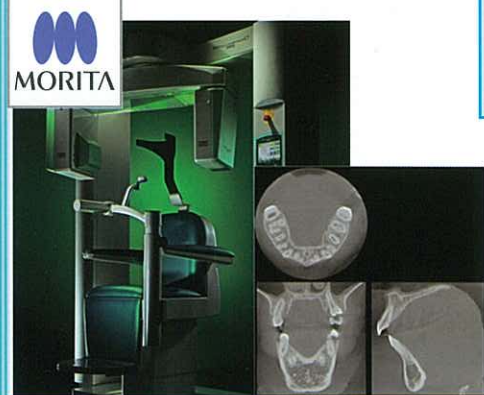

3DX MULTI-IMAGE MICRO CT

標準価格 35,000,000 円（税別）
本体のみの価格です。
オプション、取付費等は別途かかります。

3DX、ここがポイント！

- ・ボクセルサイズ 80μm の超高解像度
- ・φ80×H80mm の広範囲撮影でも高解像度を維持。
- ・正確な位置づけが必要な場合、2方向スカウト撮影可能。

モリタは、「歯科・頭頸部用小型X線CT装置」の国内初の医療用具製造許可を取得し、2001年に「3DXマルチイメージマイクロCT」の名称で販売を開始しました。海外でも非常に評価の高い機種です。世界に先駆けて発売された歯科用CTでありながら、部品を交換することでバージョンアップが可能です（現在第3世代目）。当初より、日常臨床の広い範囲で高精細な画像で安全に活用できるCT開発を目指し、技術面においてもX線光電子増倍管（イメージインテンシファイア管）からフラットパネルディテクタ（FPD）の採用により撮像領域の拡大と高解像度を実現しました。ボクセルサイズ 80μm での超高解像度で滑らかな画像を有し、ズーム再構成機能により撮影した画像から局所領域の超高解像度3Dが得られるので再撮影することなく局所的な観察が可能です。40×40mm、60×60mm、80×80mm の撮影領域が選択できます。

トリプルレーザービームと液晶ディスプレイにより簡単に位置づけでき、さらに正確な位置づけが要求される場合、2方向スカウト撮影が可能です。

User's Voice

一番の決め手は、モリタというブランドへの信頼。解像度が高いので滑らかな画像でストレスなく見られる点や被曝線量の少なさも購入のポイントだった。使い勝手も良いと思う。（東京都 A先生）

株式会社 ヨシダ



Finecube

標準価格 30,000,000 円（税別）
本体のみの価格です。
オプション、取付費等は別途かかります。

ファインキューブ、ここがポイント！

- ・マウス操作で簡単に画像を調整することができ、患者説明しやすい。
- ・複数症例画像の表示と同期操作が可能。
- ・新たにインプラントプランナー追加。

『Finecube』は「高精細画像」「高速処理」「省スペース」をコンセプトに開発されました。そして、患者さんへのコンサルテーションがしやすいCTとして定評があります。


新しく、インプラントプランナーが追加されたことで、簡単な操作でインプラント計画ができ、ますますコンサルテーション力がアップしました。ボクセルサイズ 100μm の高精細な3D画像は、マウスのみの操作で自由自在に回転移動、拡大縮小、コントラストおよびカラー調整、軟組織/硬組織の表示切替、カット、距離計測などができるので診査診断だけでなく、患者さんに手軽に画像を見せながら説得力のある説明ができます。また、撮影開始から3分弱で画像解析画面が表示されます。2DのMPR画像はもちろん3D画像も自動的に構築されて表示されます。

さらに、複数（最多で3つ）の症例画像を一つの画面に並べて表示し、同時に操作すること（同期操作）ができるので、術前・術後の比較や正常・異常の比較が容易に明確化できます。

User's Voice

導入当時、埼玉県北部でCTを導入していた歯科医院がなく、地域医療のために全額撮れる機種が必要だった。画像の操作が安易で患者説明に最も適していた。（埼玉県秩父市 栗原先生）

MORITA

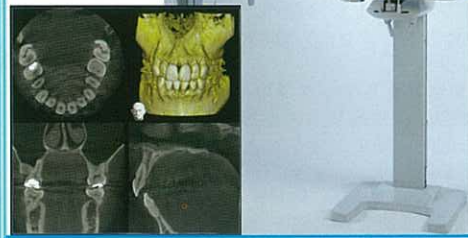

Veraviewepocs 3D

標準価格 22,550,000 円（税別）より

本体のみの価格です。
オプション、取付費等は別途かかります。
※価格はセファロの有無など条件により変化します。

ベラビューエポックス3D、ここがポイント！


- ・CT撮影の際にパノラマ画像から位置づけの指示が可能。
- ・3D対応後付バージョンアップ可能。
- ・ボクセルサイズ 125μm の高解像度。

歯科用CT装置の先駆者モリタが、『3DX』で培ったノウハウを基にパノラマX線撮影装置に3D画像を撮影できる機能を付加した複合型のX線撮影装置を開発したのが『Veraviewepocs 3D』です。従来の歯科診療の流れを変えることなく平面画像による診断から3次元イメージによる診断が可能であることが特徴です。CT撮影の前にパノラマスカウト撮影（保険収載可能）を行い、そのままの位置づけでパノラマスカウト画像上の関心領域をクリックし、READYキーを押すと、自動的に回転アームが移動し3Dポジショニングが完了。簡単にCTが撮影できます。また、『3DX』で培われた技術がボクセルサイズ 125μm という高解像度の画像を実現しました。CTの撮影時間が9.4秒と短く、被曝線量も抑えられます。撮影領域はカセットタイプを変えることにより、40×40mm、40×80mm、80×80mm の撮影が可能です。2Dのみ撮影の機種から3D対応への後付バージョンアップが可能です。

User's Voice

パノラマと併用できることと、1歯単位の撮影が可能で被曝線量が抑えられる。（茨城県常陸太田市 K先生）/ 選択理由は、画像の精度。（茨城県神栖市 安藤先生）/ パノラマと同じサイズで設置スペースを考慮せずにすんだ。パノラマの次に即座にCTが撮れる。（東京都世田谷区 田村先生）

株式会社 ヨシダ

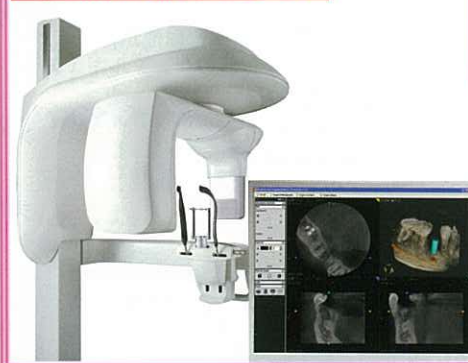

TROPHYPAN Plus

標準価格 18,400,000 円（税別）より

本体のみの価格です。
オプション、取付費等は別途かかります。
※価格はセファロの有無など条件により変化します。

トロフィーパンプラス、ここがポイント！

- ・センサー着脱交換不要。落下事故の心配なし。
- ・撮影から画像が出るまで約1分。
- ・本体定価 2000 万円以下の価格設定。


『TROPHYPAN Plus』は、「ALARA（アララ）の法則（診断に必要な撮影範囲に加え被曝線量低減を最大限考慮してX線解析診断を行う）」をコンセプトに作られました。口腔内全体の把握には通常のデジタルパノラマ撮影を行い、通常の2D撮影では十分な診断が行えない部位に対して、50mm×37mm の円柱状に必要な最小限の照射線量で3D撮影を行います。さらに、アーチファクトの少ない撮影範囲 360 度を採用し、X線被曝を低減させるようX線をパルス照射することにより、照射時間及び照射量の短縮に成功しました。撮影から画像診断まで約1分という速さも魅力です。また、パソコンの画面上でパノラマか3Dかをクリックするだけで、センサー部が自動的に回転しますので、カセット着脱時の落下事故の心配がありません。

ソフトウェアは、トロフィー社純正の『トロフィーウィンドウズ』を採用していますが、この『トロフィーウィンドウズ』は、デンタル専用デジタルX線システム『コンピュータ』や口腔内カメラ『STV/ピクトシリーズ』等、幅広い撮影システムと連動が可能です。簡単に操作できます。価格設定でもCTのさらなる普及に挑む、コストパフォーマンスの高い機種です。

User's Voice

ヨシダの2Dレントゲンのユーザーだったので、データの移管がしやすく価格も手頃だった。画像の精度も高く、患者さんに説明しやすい。（千葉県松戸市 脇谷先生）

PLANMECA

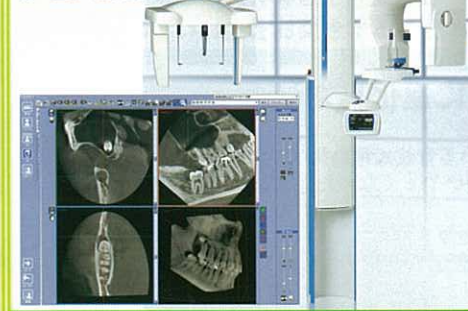

PROMAX 3D

標準価格 29,600,000 円（税別）より

本体のみの価格です。
オプション、取付費等は別途かかります。
※価格はセファロの有無など条件により変化します。

プロマックス3D、ここがポイント！

- ・画像の読み込みが速く、サクサク動く。
- ・アームに関節が3つあり、より複雑なコントロールが可能。
- ・オープンポジショニングで正面からの位置付けができる。

フィンランドの洗練されたデザインをもつ『PROMAX 3D』は、1回194°のスキヤニング、そして、パルス照射の採用によって実効照射時間を7.2秒と短時間に抑え、被曝量の大幅低減を実現しました。ステッチング機能により、歯列と顎関節部位など、解剖学的に隣接する複数の部位ボリュームを1つに繋ぎ合わせることができます。診断に必要な撮影ボリュームを選択することで、興味領域以外の部位への余分な照射を防ぐことも可能です。3つの関節機構によって複合的なアームの動きを実現できるアームコントロールテクノロジー（SCARAテクノロジー）で、より複雑なコントロールが可能です。アームの回転軌道は、機械的に限定されることなくきわめて自由な回転軌道を形成できるため、ソフトのアップグレードによる発展性を持っています。

また、管球部、センサー部を含むイメージングアームを患者さんから離すことができるので、オープンポジショニングで患者さんの位置付けが容易にできます。3D画像用ソフト『ロメキシス3Dエクスプローラ』は、画像の読み込みが速く、ストレスを感じさせずに画像を動かすことができ、操作の簡単さに加えて画質の高さにも定評があります。

User's Voice

ジーシーのデジタル機器を使用していたが、CTの導入にあたっては各社を見て回った。その中でも画像がきれいで、患者さんが理解しやすい画像だった。操作も簡単。（匿名希望）

オルソフィア LC

高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
(株式会社トクヤマデンタル)



【定価】15,000円(税別)
【内容】プライマー(5ml)1本、ペースト(1.8ml/3.2g)2本
ディスポ混和血20個、ミニブラシ(グリーン)50本、専用ケース

シンプル & スピーディーにブラケットを装着

『オルソフィア LC』は、1液プライマーとペーストから成る光重合型矯正用接着材です。シンプル&スピーディーにブラケットを接着できます。
1液プライマーは、混和・水洗する必要はありません。歯面塗布後エアブローすることで、エッチングとプライミングが完了します。
ペーストは、セラミックスブラケットやプラスチックブラケットなら、有効波長が400~500nm 且つ光量500mw/cm²以上の歯科重合用光照射器(ハロゲン、LED、キセノン等)を用いて5秒間の光照射で硬化が完了します。メタルブラケットの場合は2方向から各5秒光照射が必要です。
操作手順は「歯面清掃→プライマー塗布後、エアブロー→ブラケットにペースト塗布、歯面に圧接→光照射、硬化後ワイヤー装着」と、とてもシンプル。ブラケット装着時間が短縮され、患者さんの負担も軽減します。

インテグラファイバーポスト

歯科支台築造用審美性ジルコニアガラスファイバーポスト
(白水貿易株式会社)



種類	直径	長さ	テーパー	色
#4	0.96mm	19mm	4mm	赤(レッド)
#4.5	1.08mm	19mm	4mm	紫(パープル)
#5	1.21mm	19mm	4mm	青(ブルー)
#6	1.46mm	19mm	5mm	緑(グリーン)

【定価】
イントロセット(全4種類 各5本)19,600円(税別)
単品(1種類 10本)9,800円(税別)

強くてもしなやかな、シラン化処理済みポスト

Premier(プレミア)社製の『インテグラファイバーポスト』は、強さと弾力性を兼ね備えたファイバーポストです。
特許技術によりジルコニアと最新ARガラスファイバーを融合させたジルコニア含有ARガラスファイバーは縦軸方向に緊密に収束配置され、そのファイバー周囲をレジマトリックスが緻密に包囲しています。そのため、天然歯の象牙質に近い優れた弾性係数(52GPa)と、強い曲げ強度(1650MPa)を実現しました。応力を根管に沿って拡散させ、破折を防ぎ安全かつ強固に残存歯質を保存します。
また、ジルコニアARガラスファイバー含有により、高いX線造影性が得られ、容易に天然歯との識別が可能です。かつ、白色半透明性で市販のデュアルキュア型レジセメント等の光重合促進が期待できます。
さらに、ポスト表面は工場製造時にシラン化処理を施しているため、チェアサイドでのシンカップリング材の塗布及び乾燥の工程が不要です。
専用のインテグラドリルとファイバーポストが共にカラーコード化されているため識別が容易で、使いやすさも追求されています。

FlashMax2

ハイパワーLED照射器(有限会社 デンタルテクニカ)



【定価】188,000円(税別)

【内容】
ハンドピース本体
充電スタンド
AC/DC パワーサプライ
プラスチックカバー
先端チップ(3個)

積層充填の強い味方! 最速1秒で重合

デンマークのCMS社製『FlashMax2』(2月発売予定)は、4000mw/cm²という、一般的なLED照射器(1200mw/cm²)の3倍以上の光量を持ち、プラズマに匹敵するLED照射器です。照射モードは1秒と3秒の2つです。
『FlashMax2』は積層充填の強い味方です。光量の強さがレジンの重合収縮の拡大に影響することはありませんので、積層充填の際に各層1秒ずつ照射、最後に表面層で3秒の照射を行うことで、審美的なテクニックを妥協することなくチェアタイムを短縮させることができます。
また、4000mw/cm²で3秒照射した場合に発生する熱のエネルギーは、旧来のハロゲンタイプの照射器(500mw/cm²)で40秒照射したときよりも少ないので、圧倒的な光量による熱で歯髄が損傷する心配はありません。
そして、シンプルさを追求した汚れにくい形状や、頬側・臼歯部に届きやすい設計は、北欧の工業デザインの結晶です。
シンプルな機能美に秘められた確かなパワーを、ぜひご体感ください。

Sonicare FlexCare+

音波式電動歯ブラシ(株式会社 ヨシダ)




【医院定価】
15,100円(税別)
【患者様参考価格】
17,829円(税別)
(税込18,720円)

【内容】
ハンドル1本
ブラシヘッド スタンダード1本
ブラシヘッド ミニ2本
充電器 1台
ハードトラベルケース1個

あのソニックアークがさらに進化しました

世界の歯科専門家に最も推奨されている音波式電動歯ブラシブランド『ソニックアーク』から、さらに効果的に、さらに使いやすくなった『フレックスケアプラス』が発売されました。
『フレックスケアプラス』は歯肉の健康を推進する「ガムケアモード」を搭載、ブラークをしっかりと落とす通常の歯磨きモード「クリーンモード」(2分間)の後に、やさしく1分間磨くことにより、歯肉の炎症や出血を抑えるのを助け、わずか約2週間で歯肉の健康を推進させます。
そして、一目で交換時期がわかる「交換時期お知らせブラシ」を導入しました。ブラシが消耗すると青色のブラシが白くなって、わかりやすく交換を促します。
また、ソニックアークシリーズの特徴である特許技術「ソニックテクノロジー」と「ProResults(プロリザルツ) ブラシヘッド」による優れた歯垢除去効果と水流でフロスする感覚はそのままに、歯と歯肉の健康を求める方にもご満足いただけるシリーズです。更に、パネルのデザインを改良、さらなる使い心地の良さをご実感いただけます。

SEMINAR REPORT

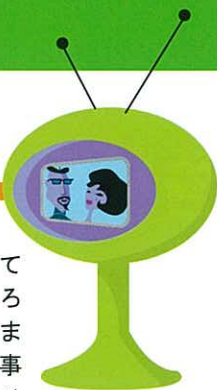

さあ、
顕微鏡歯科を
はじめよう!

11月15日(日)開催
講師:三橋 純先生
東京都ご開業

東京都内・日本青年館にて、去る2009年11月15日(日)開催致しました『マイクロスコープセミナー(さあ、顕微鏡歯科をはじめよう!)]』についてレポート致します。

今回のセミナーは、日常臨床でマイクロスコープを使用されている三橋純先生(東京都世田谷区ご開業)を講師に迎え、マイクロスコープ導入前・後の懸案事項の解決、解消を目的とした体験型デモ付きセミナーと致しました。



拡大顕微鏡の操作ポイントから、ポジショニング、ミラーテクニック、実際の使用中における工夫点などお話しいただき、参加された先生方は、実際のマイクロ操作体感や一歩踏み込んだ細かいお話をお聞きすること



ができ、マイクロスコープの有益性や実際の臨床での活用法など今後の診療への展望が開けたとのことご意見を多くいただきご満足のご様子でした。

以下、ご参加いただきました先生方のお声を掲載致します。

○マイクロスコープを利用した様々な臨床治療の症例が見られて、具体的なイメージが掴めた。

○三橋先生の人柄に惚れました!色々と聞いたセミナーの中で最も楽しく学ばせていただきました。

○顕微鏡下での歯科治療の有用性を知ることができ良かったです。

○デモ体験で実際に触れてみて、自分の目で体感、確認できたことが良かった。

○ここここまで見えるのか!!と感じました。予想以上の明確な視野に驚愕しました。

○マイクロスコープにより、色々な臨床の可能性が広がることを実感でき大変、為になりました。

○マイクロスコープに関する最新事情(情報)等を得ることができました。

○受講して改めて顕微鏡の必要性を感じました。是非導入していきたいと思います。

マイクロスコープ(手術用顕微鏡)が歯科治療へ応用されはじめてからおおよそ15年ほど経ち、欧米諸国の歯科教育現場では、拡大顕微鏡が診

療器械のひとつとして導入されているところもあるそうです。また、最近の海外歯科事情では1998年にアメリカで、根管治療専門医にマイクロスコープの使用が義務化されました。医療現場への拡大顕微鏡の導入は、眼科・耳鼻科は既に行われていましたが、遅れをとっていた歯科分野においても、ようやく歯科治療の特殊性に合致した機械が様々に出揃いました。実際に昨年11月開催の東京デンタルショーでもこれまでに製造取り扱いメーカーが増え、随所で見かけられました。また同時期には、マイクロスコープの国際学会(AMED)が初めて日本で開催されるなど、マイクロスコープを歯科治療において患者有益をもたらすアイテムとして、評価されているようです。

弊社では、マイクロスコープ診療の世界を多くの先生方に体感していただける実機デモの申込受付をしております。この他2010年1月に『イワセ・モリタコロポフェア』にてデモ付きセミナーを開催(無料)します。どうぞこの機会に体感してみたいかたがどうか。
※詳しくはイワセ営業スタッフまでお問い合わせ下さい。

セミナー情報

in 東京国際フォーラム
2010年5月16日(日)
10:00~17:30

IMPLANT SEMINAR

皆川 仁 先生

Topics

- インプラント成功の新ガイドライン
単独歯・多数歯欠損
即時埋入の新スタンダード
- 前歯部審美インプラント修復テクニック
- 硬組織・軟組織の造成施術方法とポイント

※セミナーについてのお問い合わせはイワセ営業スタッフまで!

術式が変わる



受講料

¥10,500円
※3/31までの早期お申込の場合
¥12,600円
※4/1以降にお申込の場合



The 4th Collaboration Fair

場所 Dental Plaza Tokyo (株)モリタ 有明オフィス

日時 2010年1月30日(土) 16:00 ~ 20:00 最終入場 19:30

31日(日) 10:00 ~ 17:30 最終入場 17:00

皆様のご期待にお応えて、この冬もイワセ&モリタ コラボレーションフェアを開催いたします。

器材をより深く理解していただくために、リーディングカンパニーであるモリタならではのセミナーも開催いたします(詳細はイワセ担当スタッフにお問い合わせください)。もちろんフェア特別価格もございます。

海と空の青色がいっそう澄み渡る1月の有明へ、ぜひお出かけください!



イベントコーナー



マテリアルゾーン



ネットワークシステムゾーン



ユニットゾーン



ユーティリティゾーン



KENちゃん



各支店ご案内

本社	台東区台東2-23-7	TEL:03-3832-8241
宇都宮支店	宇都宮市平出工業団地 37-6	TEL:028-613-5858
水戸支店	水戸市白梅 2-8-18	TEL:029-225-6543
野木支店	下都賀郡野木町丸林 384-15	TEL:0280-56-0567
前橋支店	前橋市紅雲町 1-22-2	TEL:027-243-8241
福島支店	福島市丸子字上六反田 14-12	TEL:024-552-1161
上野支店	台東区台東2-23-7	TEL:03-3832-8241
世田谷支店	世田谷区用賀 2-14-11	TEL:03-5491-7595
松戸支店	松戸市幸谷字観音下 159-1	TEL:047-345-3131
千葉支店	千葉市中央区椿森 1-26-3	TEL:043-252-2288
横浜支店	横浜市栄区小菅ヶ谷 1-28-9-101	TEL:045-895-3803
大宮支店	さいたま市見沼区東大宮 7-41-1	TEL:048-688-1740
東大和支店	東大和市立野 3-640-1	TEL:042-590-5770
盛岡営業所	盛岡市上堂 1-6-5	TEL:019-648-2777

★編集部から★
 △新しい年になりまして、本年も岩瀬歯科商會を宜しくお願いいたします。
 △台東区にある弊社の本社社屋の真向かいには、金刀比羅(ことうひら)神社という小さな神社があります。東京の金刀比羅といえは水道橋が有名ですが、こちらは讃岐生駒藩の中屋敷跡で、小さいながらも江戸最古の金刀比羅社です。セミナーなどで弊社本社にお立ち寄りの際は、ぜひ参拝なさってみてください。
 △金刀比羅といえは香川県。関東地方から四国へ旅行するのはかなりの遠出ですが、江戸時代はなおのこと。当時、参拝以外の旅行が禁じられていた庶民にとって、讃岐の金刀比羅にお参りすることは、お伊勢参りとともに胸躍るものでありました。
 △現代に至るまで、全国から多くの人々が長い階段を上って参拝に訪れる讃岐の金刀比羅宮は近年、社殿のある琴平山を社殿ゾーンと文化ゾーンに分けて整備され、信仰と文化を伝える地として今も賑わっています。



弊社本社前の金刀比羅神社

△文化ゾーンに展示されている所蔵品のなかでも特に有名なのが円山応挙の「遊虎図」です。応挙の虎は、現代の私たちが虎に抱く勇壮で逞猛なイメージのものではありません。すやすやと眠っている姿や滝から流れる水を親子で仲良く飲む姿を見ると、本物を見たことのない応挙が、猫を手本に虎を想像しつつ描いたことが容易に推測できます。
 △歯科は、想像力ではなく視力を駆使する世界です。近年、CTやマイクロスコープなど先生の目を助ける、虎に翼のようなツールがたくさん登場してはいますが、お疲れになった創造力に思いを馳せて目を休められてはいかがでしょう。真年にちなんで「遊虎図」を見に行かれるのも一興かと存じます。



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

株式会社岩瀬歯科商會は、「チームマイナス6%」に参加し、未来に向かって積極的に地球温暖化防止に取り組みます。